


redsnap.Oxylog600

Diese Kurzanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des redsnap!

© Jede Veröffentlichung dieser Anweisung (auch auszugsweise) bedarf der schriftlichen Genehmigung der hestomed GmbH.

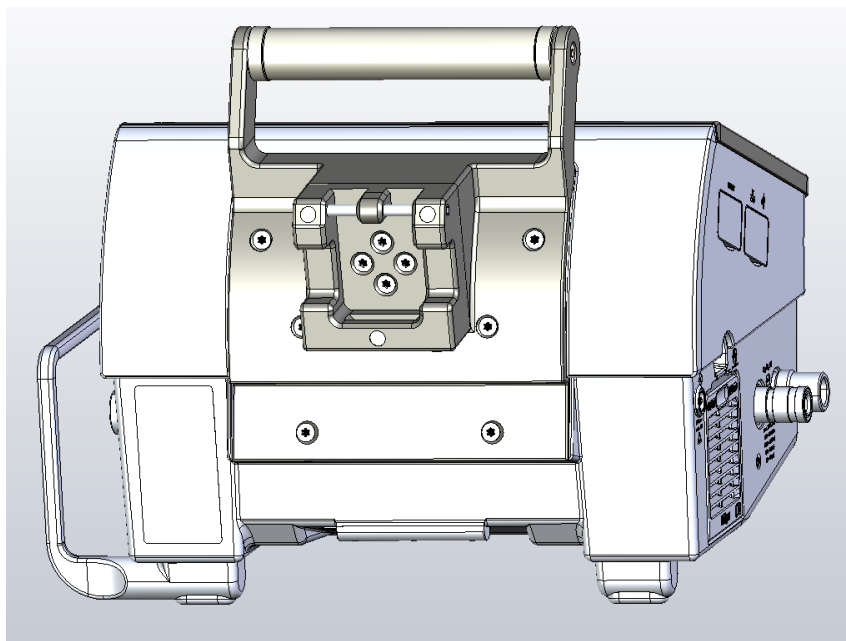

Hersteller



hestomed GmbH
Kaufahrtei 25, Haus 1
D09120 Chemnitz
Deutschland



Sicherheitsinformationen

	Das Produkt darf nur von autorisiertem Personal bedient werden.
	Verboten ist die Nutzung des redsnap.Oxylog600 durch Anwender, die nicht mit der sicheren Handhabung des Produktes vertraut sind.
	Jeder Anwender muss sich vor der Verwendung mit den Bedienelementen und Funktionen des redsnap.Oxylog600 vertraut machen.
	Das redsnap.Oxylog600 ist nicht zu verwenden, wenn es wegen einer Beschädigung nicht oder nicht vollständig funktionsfähig sein sollte.
	Patienten-, Anwender-, und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

	Die Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Herstellers der kombinierten Produkte sind zu beachten.
	Die Nutzung der Produkte und Medizinprodukte ist nur sicher, wenn die einschlägige Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers berücksichtigt wird.
	Patienten- und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

Begriffe, Symbole und Erklärungen

Verweis: Gebrauchsanweisung redsnap

Spezifische Ergänzung zur bestimmungsgemäßen Verwendung gemäß Gebrauchsanweisung redsnap


Das redsnap.Oxylog dient in Verbindung mit einem Oxylog 600 der Firma Dräger medical AG, der Befestigung des genannten Gerätes an einer wandseitigen redsnap - Halterung.

Hinweis:

Das redsnap.Oxylog gibt es nicht mit der Option /E, da das Oxylog 600 keinen 12V Eingang hat und nur mit einem externen Netzteil mit 12V geladen werden kann.



Aufbau und Systembestandteile

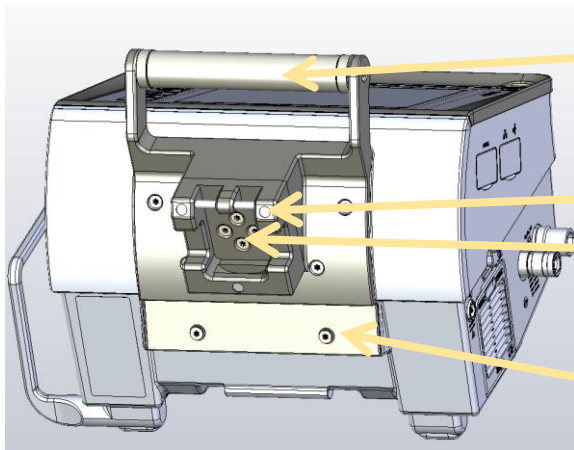

- Tragegriff (Übernahme des Griffes und der Griffschrauben der originalen DRÄGER-Gerätehalterung)
- redsnap.uni mit 3 integrierten Magneten
- redsnap.uni verschraubt mit dem spezifischen Oxylog600 Adapter mit 4 Stück M5 x 16 Befestigungsschrauben (einbaufertig vormontiert)
- spezifischer Oxylog- Adapter mit 6 Stück M5 Schrauben am Beatmungsgerät befestigt.

Verwendung


Die Bedienung erfolgt gemäß Gebrauchsanweisung redsnap.

Anleitung zur Installation des redsnap.Oxylog600

	Installation nur durch fachkundiges Personal und unter Einhaltung der Herstellervorgaben
	Bei nicht fachgerechter Installation besteht die Gefahr, dass sich die Halterung vom Oxylog 600 löst und Anwender oder Patienten durch herumfliegende Teile zu Schaden kommen.
	Die Installation des redsnap.Oxylog600 darf ausschließlich durch Personen vorgenommen werden, die das erforderliche Werkzeug fachgerecht verwenden können, die die anzuwendenden Schraubkräfte aufbringen können und die Wirksamkeit der TufLok® Beschichtung und deren Grenzen kennen.

Erforderliches Werkzeug:

Schraubendreher Innensechsrund (Torx) 25 mit Drehmomentbegrenzung

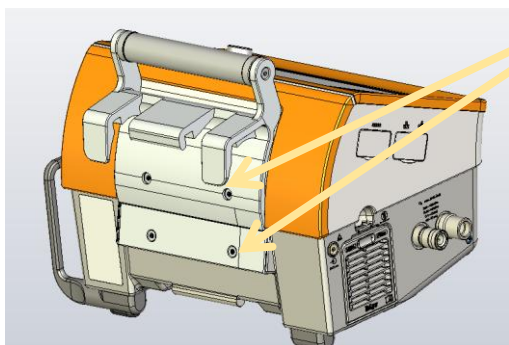


Lösen der 4 Schrauben zur Befestigung des Originalgriffes des Oxylog 600, die Schrauben sind nicht wiederzuverwenden.

Abnehmen des Originalgriffes


Die klebende Dichtung erschwert das Abnehmen des Griffes!



Lösen der Schrauben zur Befestigung des Kunststoffkeiles, die Schrauben sind nicht wiederzuverwenden.

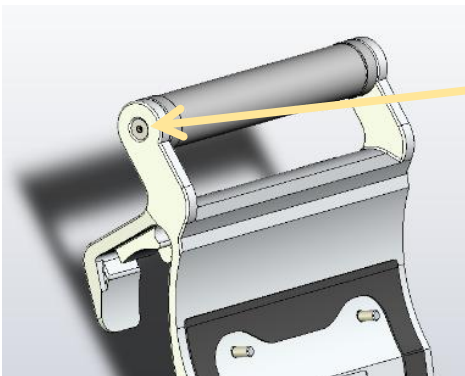


Abbau des Tragegriffes und Montage am redsnap.oxylog in der gleichen Weise, die Schrauben sind wiederzuverwenden, mit mittelfester Schraubensicherung zu sichern und mit 5,4Nm anzuziehen.

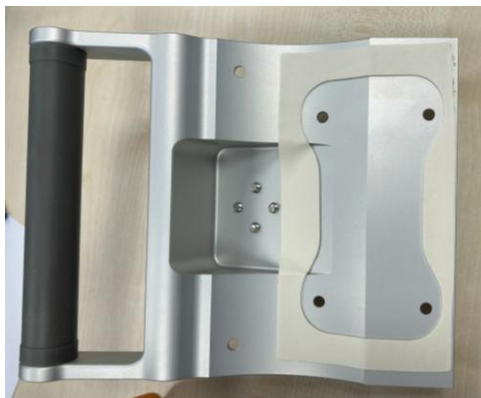


Anbringen der selbstklebenden Dichtung am spezifischen Oxylog600 Adapter.



Einlegen des Kunststoffkeiles

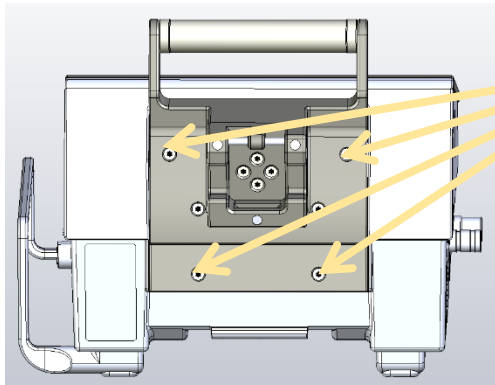

Befestigung des redsnap.Oxylog600 am
Oxylog 600 mittels 4 Stück M5 x 16
Senkkopfschrauben nach ISO14581 mit TufLok®,
Anzugsmoment 3,5Nm
Hinweis: Anzugsmoment setzt sich zusammen aus:
2,5Nm (Vorgabe DRÄGER zum Anzugsmoment)
+ 1,0 Nm (TufLok® Widerstandsmoment).

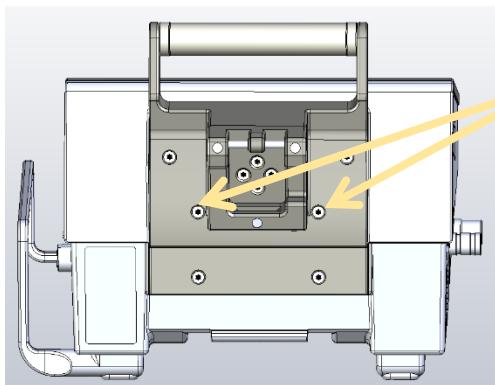

Befestigung der 2 Stück M5 x 20
Senkkopfschrauben nach ISO14581 mit TufLok®
Anzugsmoment 3,5Nm

Hygienische Aufbereitung

Die hygienische Aufbereitung ist in der Gebrauchsanweisung des redsnap beschrieben.

Prüfung, Wartung und Instandsetzung

Es sind die Angaben dazu in der Gebrauchsanweisung redsnap zu beachten.

Gewährleistung und Haftung

Es gelten die Bedingungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung festgelegt sind.

Lebensdauer & Entsorgung

Es gelten die Festlegungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung festgelegt sind.



Technische Daten redsnap.Oxylog600

	hestomed GmbH Kauffahrtei 25, Haus 1 09120 Chemnitz Germany	 info@hestomed.de  +49 371 646145-0  redsnap.eu
Warenanlieferung und -abholung	hestomed GmbH Hildegard-Helbig-Straße 5 74259 Widdern Germany	 +49 6298 3753-100  +49 6298 3753-144
	redsnap5-§-Oxylog-§	(§ kennzeichnet herstellerspezifische Revisionsstände)
Abmessungen [mm]:	170 x 195 x 80 (Breite x Höhe x Tiefe)	
Lager- und Betriebsbedingungen: (transiente Bedingungen gemäß DIN EN 60601-1-12)		-20°C bis 50°C
		620 hPa bis 1060 hPa
		15% bis 90% nicht kondensierend
Masse [g]:	900g	
Material:	EN AW-5754 AlMg3	
Oberfläche:	mechanische Teile: Aluminium natur eloxiert,	
Schrauben:	A2 070 mit TufLok®	
Zulassungen (konform):	DIN EN 1789 Punkte 4.4.11 und 5.3 konform	
Ersatzteile redsnap.Oxylog600		
	1VE bestehend aus 4 Stück Senkschrauben M5 x 16 TX25 A2 ISO 14581 mit TufLok® 2 Stück Senkschrauben M5 x 20 TX25 A2 ISO14581 mit TufLok®	
	1VE bestehend aus: 4 Stück Senkschrauben M5 x 16 TX25 A2 ISO 14581 mit TufLok®	
	1 Stück Dichtung (DRÄGER: 5790899)	