

redsnap.rail

Diese Kurzanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des redsnap!

© Jede Veröffentlichung dieser Anweisung (auch auszugsweise) bedarf der schriftlichen Genehmigung der hestomed GmbH.



Hersteller



hestomed GmbH
Kauffahrtei 25, Haus 1
D09120 Chemnitz
Deutschland

Revision: 01a vom 2026-09-02



Sicherheitsinformationen

	Das Produkt darf nur von autorisiertem Personal bedient werden.
	Verboten ist die Nutzung des redsnap.rail durch Anwender, die nicht mit der sicheren Handhabung des Produktes vertraut sind.
	Jeder Anwender muss sich vor der Verwendung mit den Bedienelementen und Funktionen des redsnap.rail vertraut machen.
	Das redsnap.rail ist nicht zu verwenden, wenn es wegen einer Beschädigung nicht oder nicht vollständig funktionsfähig sein sollte.
	Patienten-, Anwender-, und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

	Die Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Herstellers der kombinierten Produkte sind zu beachten.
	Die Nutzung der Produkte und Medizinprodukte ist nur sicher, wenn die einschlägige Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers berücksichtigt wird.
	Patienten- und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

Begriffe, Symbole und Erklärungen

Verweis: Gebrauchsanweisung redsnap


Spezifische Ergänzung zur bestimmungsgemäßen Verwendung gemäß Gebrauchsanweisung redsnap

	Vor Benutzung des redsnap.rail muss sich der Anwender über die Tragfähigkeit der Normschiene informieren.
	Verboten ist die Nutzung des redsnap.rail an einer Normschiene, die die Gesamtlast von redsnap zuzüglich der anzuhängenden Gerätemasse nicht aufnehmen kann.
	Patienten-, Anwender-, Fahrzeug- und Geräteschäden werden dadurch verhindert. Wir empfehlen bei Nutzung des redsnap für größeren Gerätelasten an Normschienen den Einsatz des redsnap.2rail.

Das redsnap.rail wird an einer Normschiene (25mm x 10mm) festgeschraubt. Damit steht die Gerätehalterung redsnap in einem Rettungstransport- Fahrzeuges oder an einer Fahrtrage zur Verfügung. Die redsnap Gerätehalterung dient in Verbindung mit dem spezifischen geräteseitigen redsnap der werkzeuglosen Befestigung von Geräten während des Transportes sowie zur einfachen und schnellen Entnahme des Gerätes am Einsatzort.



Aufbau und Systembestandteile

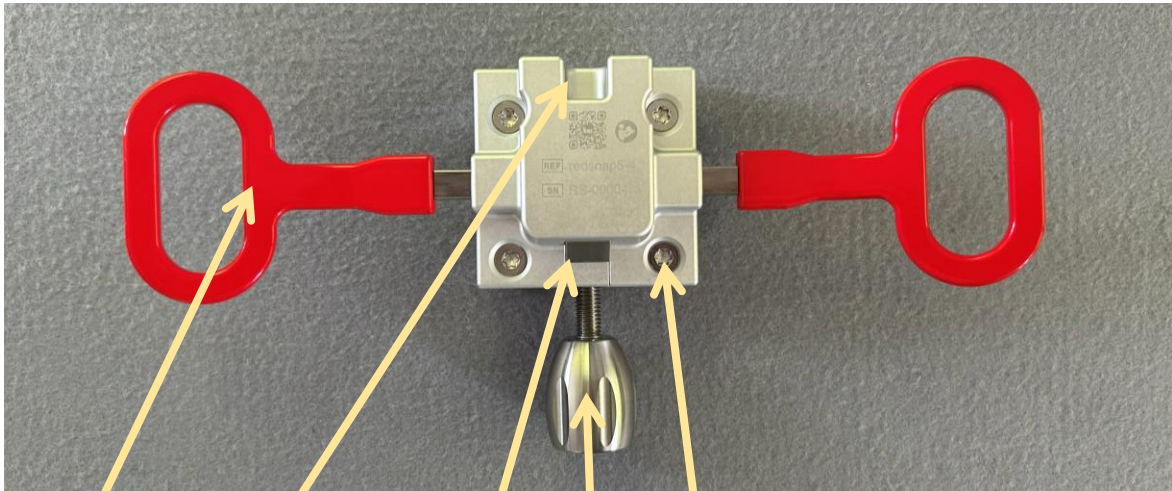

Griff zur Entriegelung

Aufnahme für Schwenkachse

Verriegelungsschnapper

Griffspindel


redsnap Verriegelung mit 4 Stück Befestigungsschrauben
M6 x 12 TX30 A2 TufLok® 8,5 Nm
(einbaufertig vormontiert)

Verwendung

Die Bedienung erfolgt gemäß Gebrauchsanweisung redsnap.

Anleitung zur Installation des redsnap.rail

	Installation nur durch fachkundiges Personal und unter Einhaltung der Herstellervorgaben
	Bei nicht fachgerechter Installation besteht die Gefahr, dass sich die Halterung von der Wand löst und Anwender oder Patienten durch herumfliegende Teile zu Schaden kommen.
	Die Installation des redsnap.rail darf ausschließlich durch Personen vorgenommen werden, die die notwendige Kraft aufbringen können, um das redsnap.rail sicher auf der Normschiene zu befestigen.

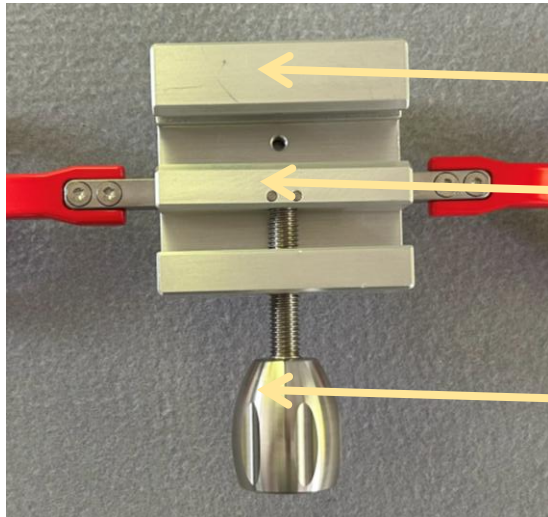

obere Normschienenaufnahme

untere Normschienenaufnahme

Griffspindel



Aufschauben der Spannwanen des redsnap.rail

Aufsetzen der oberen Normschienenaufnahme des redsnap.rail auf die Normschiene, Festschrauben durch Drehen im Uhrzeigersinn der Griffspindel des redsnap.rail, dadurch wird die unteren Normschienenaufnahme formschlüssig gegen die Normschiene gedrückt. Kontrolle, dass die Normschiene formschlüssig von unterer und oberer Normschienenaufnahme umfasst wird.

Die Griffspindel muss so fest wie möglich angezogen werden, um ein Verschieben des redsnap.rail während der Fahrt sicher zu verhindern.

Zum Festziehen ist kein Werkzeug zu verwenden.

Erforderliches Werkzeug:

kein Werkzeug erforderlich

Hygienische Aufbereitung

Die hygienische Aufbereitung ist in der Gebrauchsanweisung des redsnap beschrieben.

Prüfung, Wartung und Instandsetzung

Es sind die Angaben dazu in der Gebrauchsanweisung redsnap zu beachten.

Gewährleistung und Haftung

Es gelten die Bedingungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung festgelegt sind.

Lebensdauer & Entsorgung

Es gelten die Festlegungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung festgelegt sind.



Technische Daten

Technische Daten		
	hestomed GmbH Kauffahrtei 25, Haus 1 09120 Chemnitz Germany	 info@hestomed.de  +49 371 646145-0  redsnap.eu
Warenanlieferung und -abholung	hestomed GmbH Hildegard-Helbig-Straße 5 74259 Widdern Germany	 +49 6298 3753-100  +49 6298 3753-144
	redsnap5-§-rail-§	(§ kennzeichnet herstellerspezifische Revisionsstände)
Abmessungen [mm]:	300 x 140 x 65 (Breite x Höhe x Tiefe)	
Lager- und Betriebsbedingungen: (transiente Bedingungen gemäß DIN EN 60601-1-12)		-20°C bis 50°C
		620 hPa bis 1060 hPa
		15% bis 90% nicht kondensierend
Masse [g]:	850 g	
Material:	EN AW-5754 AlMg3	
Oberfläche:	mechanische Teile: Aluminium natur eloxiert, Griffe: Aluminium pulverbeschichtet Griffspindel A2	
Schrauben:	A2 070 mit TufLok®	
Zulassungen (konform):	REACH konform	
	RoHS konform	
	DIN EN 1789 Punkte 4.4.11 und 5.3 konform	
Ersatzteile redsnap.rail		
310100300	Grundkörper_Wand (10305-25002-200-001)	
310100400	Griffe paarweise mit 4 Stück Befestigungsschrauben M4 x 8 A2 ISO14581 T20 mit TufLok®	
310100500	Normschienenklaue (10305-250002-100-000)	
310100600	1VE bestehend aus: 4 Stück Verbindungsschrauben M6x12 A2 ISO14581 T30 mit TufLok®	