
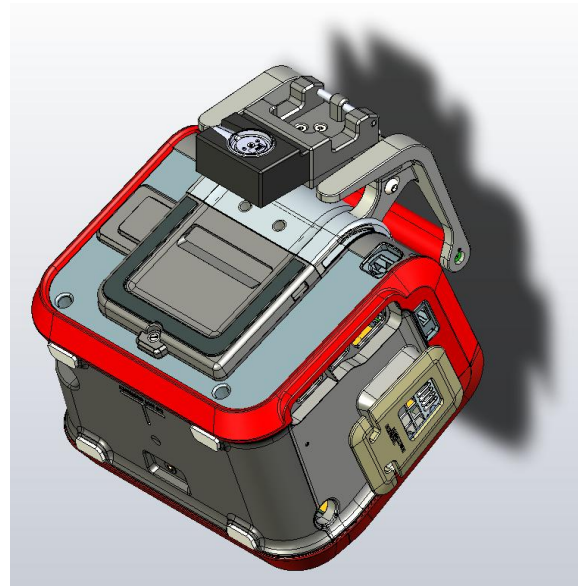


redsnap.T1 redsnap.T1/E

Diese Kurzanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des redsnap!

© Jede Veröffentlichung dieser Anweisung (auch auszugsweise) bedarf der schriftlichen Genehmigung der hestomed GmbH.

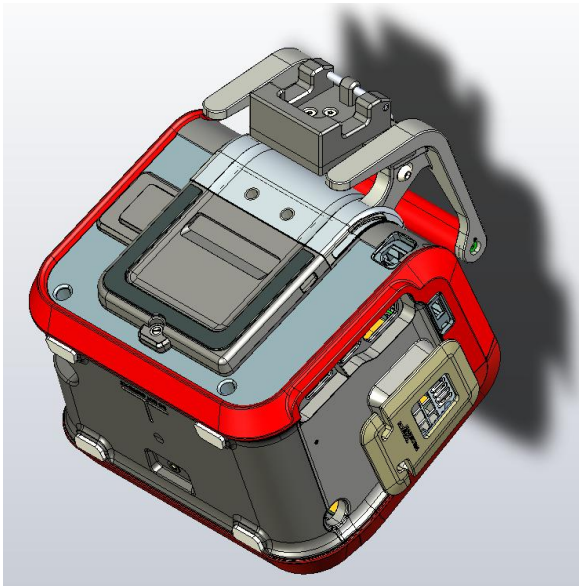

Hersteller



hestomed GmbH
Kaufahrtei 25, Haus 1
D09120 Chemnitz
Deutschland



Sicherheitsinformationen

	Das Produkt darf nur von autorisiertem Personal bedient werden.
	Verboten ist die Nutzung des redsnap.T1 oder des redsnap.T1/E durch Anwender, die nicht mit der sicheren Handhabung des Produktes vertraut sind. Jeder Anwender muss sich vor der Verwendung mit den Bedienelementen und Funktionen des redsnap.T1 bzw. des redsnap.T1/E vertraut machen.
	Die beiden Varianten der redsnap Halterungen für den T1 sind nicht zu verwenden, wenn sie wegen einer Beschädigung nicht oder nicht vollständig funktionsfähig sein sollte.
	Patienten-, Anwender- und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

	Die Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Herstellers der kombinierten Produkte sind zu beachten.
	Die Nutzung der Produkte und Medizinprodukte ist nur sicher, wenn die einschlägige Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers berücksichtigt wird.
	Patienten- und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

Begriffe, Symbole und Erklärungen

Verweis: Gebrauchsanweisung redsnap.


Spezifische Ergänzung zur bestimmungsgemäßen Verwendung gemäß Gebrauchsanweisung redsnap

Das redsnap.T1 dient in Verbindung mit einem Beatmungsgerät T1 der Firma Hamilton, der Befestigung des genannten Gerätes an einer wandseitigen redsnap - Halterung.

Das redsnap.T1/E dient in Verbindung mit einem Beatmungsgerät T1 der Firma Hamilton, der Befestigung des genannten Gerätes an einer wandseitigen redsnap - Halterung. Durch die integrierte elektrische Verbindung des redsnap.T1/E wird nach dem Einhängen in ein redsnap.wall/E der interne Akku des T1 geladen, wenn die wandseitige Halterung für die Option /E vorbereitet ist.



Aufbau und Systembestandteile

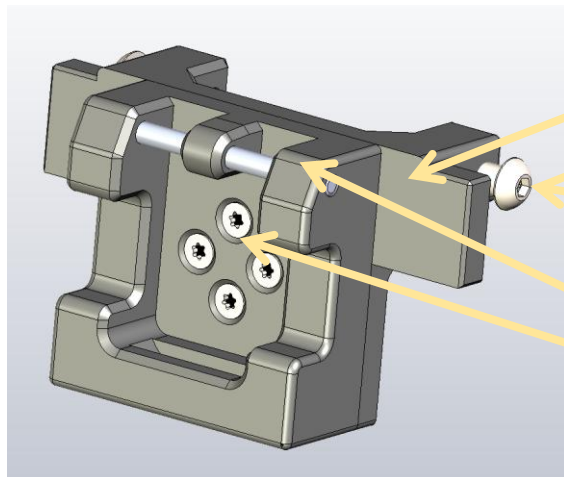


redsnap.T1

spezifischer T1 Adapter

mit 2x M8 x 25 A2 ISO 7380 (Innensechskant)

redsnap.uni mit 3 integrierten Magneten

redsnap.uni verschraubt mit dem spezifischen T1 Adapter mit 4 Stück M5 x20 Befestigungsschrauben (einbaufertig vormontiert).

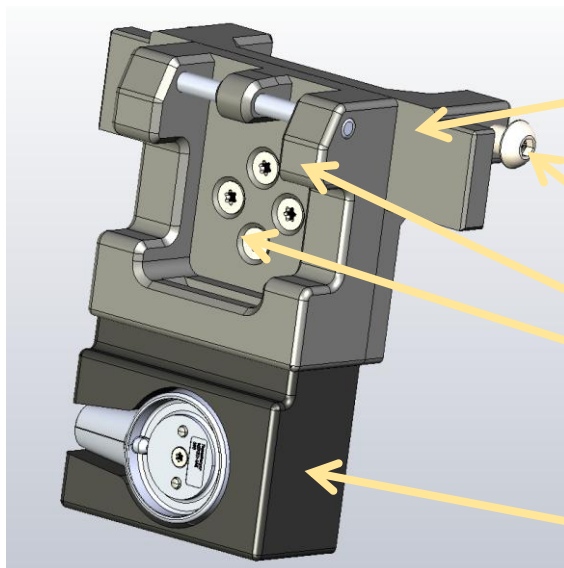

redsnap.T1/E

spezifischer T1 Adapter

mit 2x M8 x 25 A2 ISO 7380 (Innensechskant)

redsnap.uni mit 3 integrierten Magneten

redsnap.uni verschraubt mit dem spezifischen T1 Adapter mit 4 Stück M5 x20 Befestigungsschrauben (einbaufertig vormontiert).

Anschlussbox /Eplug mit Ladeplug - MagCode

Verwendung

Die Bedienung erfolgt gemäß Gebrauchsanweisung redsnap.

Anleitung zur Installation des redsnap.T1....redsnap.T1/E



Installation nur durch fachkundiges Personal und unter Einhaltung der Herstellervorgaben


Bei nicht fachgerechter Installation besteht die Gefahr, dass sich die Halterung vom T1 löst und Anwender oder Patienten durch herumfliegende Teile zu Schaden kommen.

Die Installation des redsnap.T1 redsnap.T1/E darf ausschließlich durch Personen vorgenommen werden, die das erforderliche Werkzeug fachgerecht verwenden können, die die anzuwendenden Schraubkräfte aufbringen können und die Wirksamkeit der TufLok® Beschichtung und deren Grenzen kennen.




Erforderliches Werkzeug:

Schraubendreher Innensechskant 5mm mit Drehmomentbegrenzung

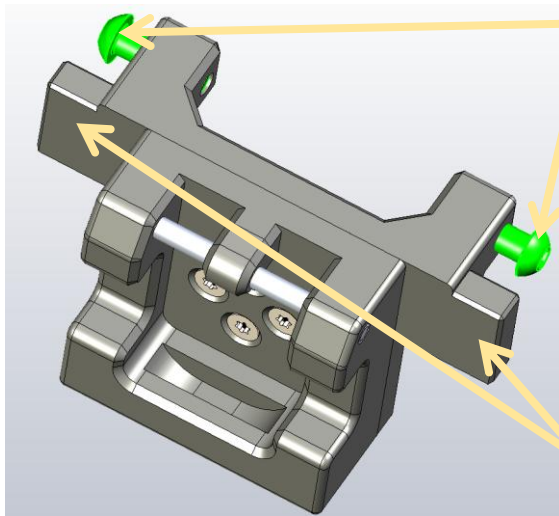


Entfernen der beiden M8 x 25 Schrauben.

Normschienenstücke

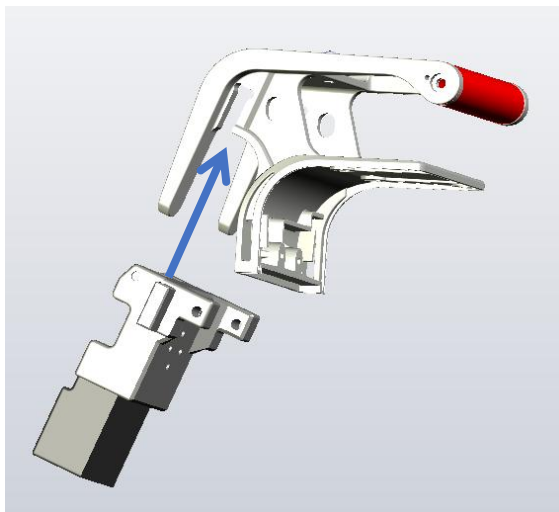

Der redsnap.T1 redsnap.T1/E wird von unten in den Griff des T1 eingeschoben, so dass die beiden Normschienenstücke am Adapter T1 in die Aussparungen des T1 Griffes positioniert sind.

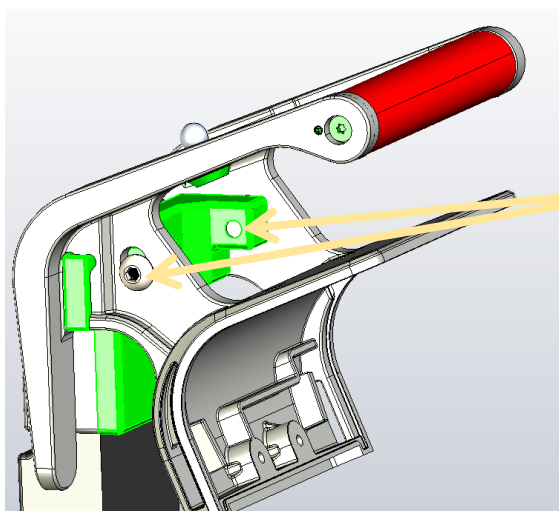

Wenn der in der Abbildung "grün" dargestellte T1 Adapter am Anschlag anliegt, wird der redsnap.T1 mit dem Griff des T1 durch die beiden Aussparungen im Griff mit den M8 x 25 Schrauben mit 8 Nm verschraubt.



Ergänzung redsnap.II/E



Kabelverlegung und anschließend Einstecken des Winkelsteckers in die 12V Ladebuchse des T1



Sicherungswechsel am redsnap.T1/E

Trennen des Ladesteckers am T1

Demontieren des Adapters durch Lösen der beiden M8 x 25 Schrauben.

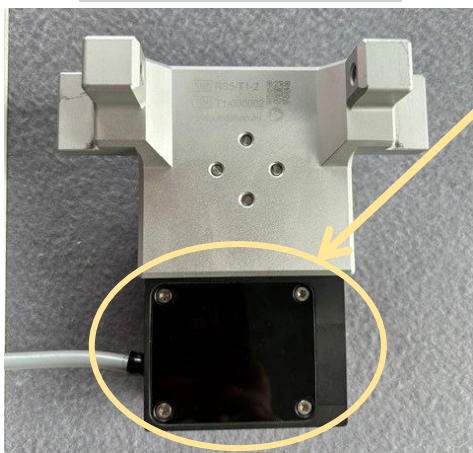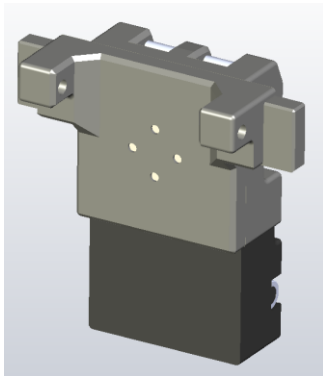

Demontieren der 4 selbstfurchenden Schrauben (TX10) und Öffnen der Abdeckung.
Ersatz der Sicherung durch einen gleichwertigen Typ,
Verschließen der Anschlussbox (/Eplug)
und installieren des redsnap.T1/E gemäß dieser Anleitung.



Die Verbindung zwischen dem redsnap.uni und der Anschlussbox darf nicht getrennt werden (2 Stück M5x50 DIN912 Innensechskant).

Diese Verbindung ist auf die Verwendung mit dem redsnap.wall/E eingestellt.

Wenn diese Verbindung getrennt wurde, kann eine ordnungsgemäße elektrische Verbindung zwischen redsnap.uni/E und redsnap.wall/E nicht gewährleistet werden. Die Einstellung muss nach Herstellervorgaben neu durchgeführt werden.



Hygienische Aufbereitung

Die hygienische Aufbereitung ist in der Gebrauchsanweisung des redsnap beschrieben.

Prüfung, Wartung und Instandsetzung

 redsnap.T1/E	Die Kontakte des MagCode plug sind nach jeder Reinigung oder Desinfektion auf Verschleißerscheinungen zu kontrollieren.
	Bei dunklen Verfärbungen oder Beschädigungen muss der MagCode plug ausgewechselt werden.
	Nur durch unbeschädigte Kontaktierungsstellen am MagCode plug wird das Fließen des Ladestromes zum angeschlossenen Gerät sichergestellt.

Weiterhin sind die Festlegungen in der Gebrauchsanweisung redsnap zu Prüfung, Wartung und Instandsetzung zu beachten.

Gewährleistung und Haftung

Es gelten die Bedingungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung festgelegt sind.

Lebensdauer & Entsorgung

Es gelten die Festlegungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung redsnap festgelegt sind.



Technische Daten redsnap.T1 redsnap.T1/E

	hestomed GmbH Kauffahrtei 25, Haus 1 09120 Chemnitz Germany	 info@hestomed.de  +49 371 646145-0  redsnap.eu
Warenanlieferung und -abholung	hestomed GmbH Hildegard-Helbig-Straße 5 74259 Widdern Germany	 +49 6298 3753-100  +49 6298 3753-144
	redsnap5-§-T1-§ redsnap5-§-T1-§-Eplug-§	(§ kennzeichnet herstellerspezifische Revisionsstände)
Abmessungen [mm]: Breite x Höhe x Tiefe	135 x 78 x 65 redsnap.T1 135 x 135 x 70 redsnap.T1/E	
Lager- und Betriebsbedingungen: (transiente Bedingungen gemäß DIN EN 60601-1-12)	 -20°C bis 50°C	
	 620 hPa bis 1060 hPa	
	 15% bis 90% nicht kondensierend	
Masse [g]:	585 g redsnap.T1 750 g redsnap.T1/E	
Material:	EN AW-5754 AlMg3	
Oberfläche:	mechanische Teile: Aluminium natur eloxiert, Anschlussbox: Polyamid glasfaserverstärkt	
Schrauben:	A2 070 mit TufLok®	
Schutzklasse:	IP 43 (Schutz gegen Staub und gegen Tropf- und Sprühwasser)	
	 III	
Sicherung:	 ø 5 x 20 10A T	
Zulassungen (konform):	REACH konform	
	RoHS konform	
	DIN EN 1789 Punkte 4.4.11 und 5.3 konform	



Ersatzteile redsnap.T1 redsnap.T1/E	
310100700	1VE (2 Stück) Flachkopfschrauben M8 x 25 A2 ISO 7380 (Innensechskant 5mm) mit TufLok® Beschichtung
310100200	1VE (4 Stück) Senkschrauben M5 x 16 TX25 A2 ISO 14581 mit TufLok® Beschichtung
310100800	1VE 10Stück Feinsicherung 5x20 T 10A