



redfix.

GERÄTEHALTER PERFUSOR® SPACE



AUS LEIDENSCHAFT FÜR INNOVATIONEN

Jahrelange Erfahrung im Vertrieb und in der Herstellung von Medizinprodukte sind eine solide Basis für den Erfolg. Unsere versierten Fachleute kennen sich in der Branche bestens aus und verfügen über das Wissen, um stets Topleistungen zu erbringen. Ein wichtiger Leistungsbaustein von hestomed ist dabei die kompetente Beratung, denn gerade im medizinischen Bereich spielt diese eine wichtige Rolle.

INHALT

redfix. Gerätehalterung Perfusor® space, einfach	4
redfix. Gerätehalterung Perfusor® space, 2fach	8

redfix.

SCHUTZBÜGEL
FÜR
KOLBENANTRIEB
(OPTIONAL)

GESICHERTE
RÄNDELSCHRAUBE
ZUR ARRETIERUNG
DES GERÄTES

SCHNELL UND SICHER

REDFIX – DIE CLEVERE GERÄTEHALTERUNG

Unsere redfix Halterungen stehen für maximale Sicherheit und kinderleichte Handhabung. Dank des intelligenten Designs lassen sich Geräte schnell und zuverlässig befestigen. Dabei setzen wir auf eine materialsparende Konstruktion, die nicht nur das Gewicht minimiert, sondern auch Ressourcen schont. Leicht, robust und auf das Wesentliche reduziert – für perfekte Halterungen ohne Kompromisse!

PRAKTISCH UND INNOVATIV

GERÄTEHALTERUNG FÜR PERFUSOR SPACE ODER INFUSOMAT SPACE VON B.BRAUN


Die redfix-Gerätehalterung bietet eine zuverlässige Befestigung für den Perfusor Space oder Infusomat Space von B. Braun in Rettungsfahrzeugen. Dank der kompakten und leichten Bauweise bleibt sie stabil und robust, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen.

Die Halterung wird einfach und sicher mit einer Schnellspannklaue an einer waagerechten/senkrechten Normschiene oder einem Rundrohr fixiert. Das Zusammenspiel aus Ballengriff und Auslösehebel ermöglicht eine mühelose Schnellverstellung und gewährleistet eine sichere Arretierung.

Der Infusomat oder Perfusor kann werkzeuglos entnommen werden. Ein klappbarer Tragebügel sorgt für zusätzlichen Komfort, während optionale Extras wie ein Schutzbügel für den Kolbenantrieb und eine automatische Stromversorgung erhältlich sind.

Für maximale Sicherheit wurde die Halterung gemäß DIN EN 1789 dynamisch crash-getestet – für den sicheren Einsatz auch unter extremen Bedingungen.

MODELL	BEST.-NR.
redfix. Einfach-Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space für waagerechte Normschienen/Rundrohr	009690-K
redfix. Einfach-Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space für senkrechte Normschienen/Rundrohr	009701-K
optionale Stromversorgung 12V für Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space	009702
optionaler Schutzbügel für Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space	13492

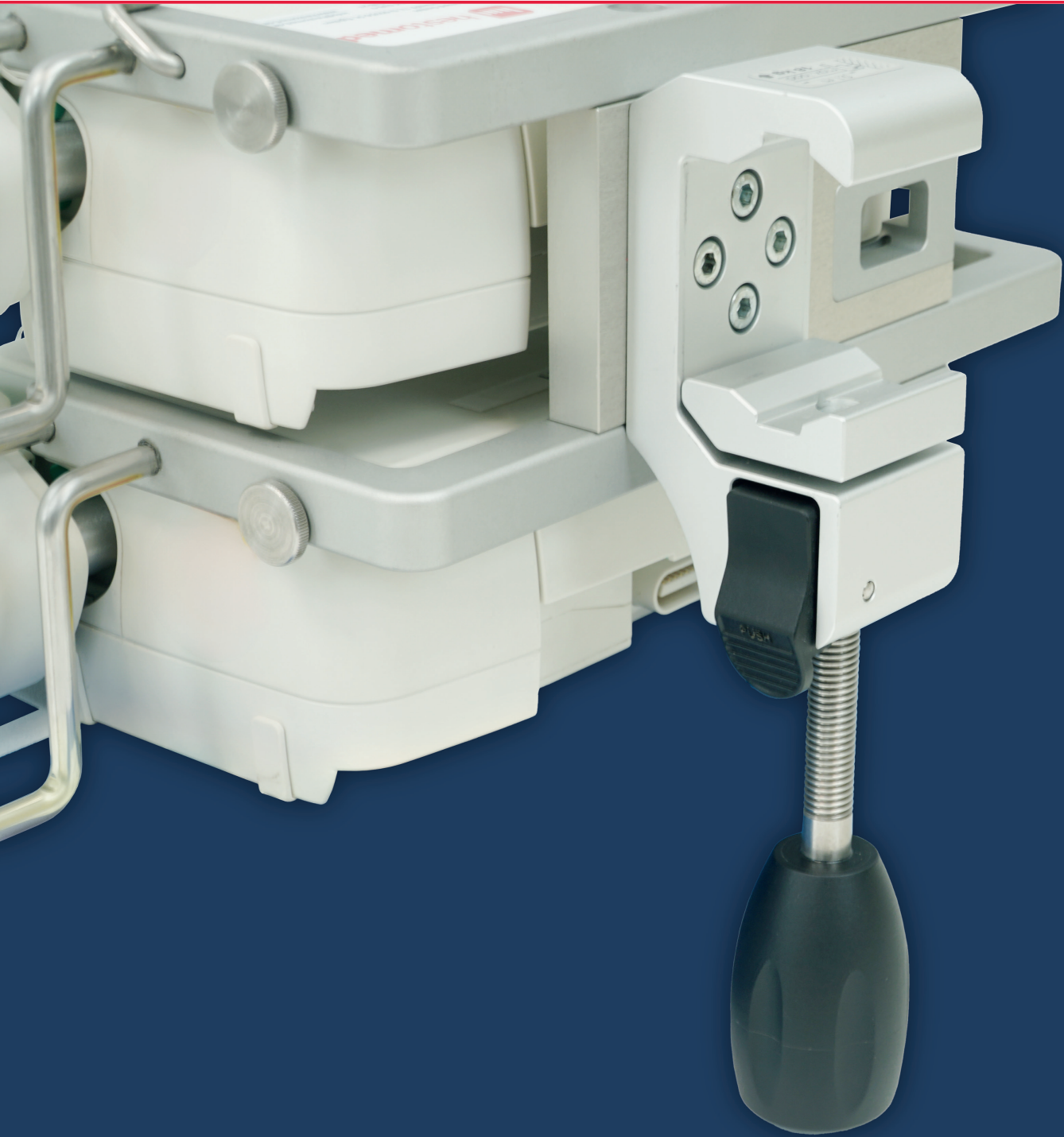

WAAGERECHTE BEFESTIGUNG

2FACH-GERÄTEHALTERUNG FÜR PERFUSOR SPACE ODER INFUSOMAT SPACE VON B.BRAUN

Mit der redfix 2fach-Gerätehalterung lassen sich zwei Perfusor Space oder Infusomat Space von B. Braun sicher und platzsparend an einer waagerechten/senkrechten Normschiene oder einem Rundrohr im Rettungsfahrzeug befestigen. Die werkzeuglose Entnahme der Geräte ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff im Notfall.

Für höchste Sicherheit wurde die Halterung gemäß DIN EN 1789 dynamisch crash-getestet. Ein klappbarer Tragebügel sorgt für zusätzlichen Komfort. Die Halterung wird inklusive automatischer Stromversorgung geliefert – das Kombi-Kabel SP von B. Braun ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das passende 12V- oder 220V-Anschlusskabel ist separat erhältlich.



KOMBI-KABEL SP
VON B.BRAUN
BEREITS IM
LIEFERUMFANG

SCHUTZBÜGEL FÜR
KOLBENANTRIEB
(OPTIONAL)



DYNAMISCH
CRASH-GETESTET
NACH DIN EN 1789

MODELL	BEST.-NR.
redfix. Doppel-Gerätehalterung Perfusor Space für waagerechte Normschienen/Rundrohr	010242-K
redfix. Doppel-Gerätehalterung Perfusor Space für senkrechte Normschienen/Rundrohr	010250-K
optionale B.Braun Anschlussleitung für Perfusor Space (12V)	8713231
optionaler Schutzbügel für Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space	13492

WWW.HESTOMED.DE



HERSTELLER

hestomed GmbH
Am Eichenwald 13 | D-09356 St. Egidien

Fon +49 37204 638-0 info@hestomed.de
Fax +49 37204 638-21 www.hestomed.de



VERTRIEBSGESELLSCHAFT

hestomed+helbig GmbH & Co.KG
Hildegard-Helbig-Straße 5 | D-74259 Widdern

Fon +49 6298 3753-100 info@hestomed-helbig.de
Fax +49 6298 3753-144 www.hestomed-helbig.de